

visio.lign®

Verblendsystem

Wir liefern das System. Sie erzielen den Erfolg.

UMWELTFREUNDLICHE HERSTELLUNG



FSC®

Das für diese visio.lign Systemübersicht eingesetzte Papier ist nach dem internationalen FSC-Standard hergestellt. Der Zellstoff wurde anteilig aus zertifizierten, also vorbildlich bewirtschafteten Waldflächen, hergestellt. Dabei wird u. a. sicher gestellt, dass bei Entnahme von Holzprodukten die Artenvielfalt und ökologischen Abläufe des Waldes erhalten bleiben.

Natürliche Ästhetik für perfekte
implantatprothetische Lösungen
durch aufeinander abgestimmte
Polymer-Komposit-Werkstoffe.

visio.lign®
Verblendsystem

visio.lign® Indikationen

- Provisorische Sofortversorgung
- Implantatgetragene Versorgung
- Brücken, Steg- und Riegelarbeiten
- Veneertechnik
- Inlays - Onlays - Overlays
- Festsitzende und herausnehmbare Versorgung


visio.lign® Vorteile

- + Farbbeständigkeit
- + Plaquesresistenz
- + Reproduzierbare Ästhetik
durch vorgefertigte Verblendschalen
- + Abrasionswerte vergleichbar mit natürlichen Zähnen
- + Verbundfestigkeit zu allen Gerüstwerkstoffen
(Universität geprüft!)
- + Gnathologische Verträglichkeit
- + Standardisierung der Verarbeitung
- + Individuelle Frei-Form-Schichtung
- + Optimal zum Finish und Cut-Back
von CAD-CAM gefertigten Restaurationen
- + Chipping Reparatur auf Keramikniveau
- = Hervorragend geeignet für ästhetische implantatprothetische
wie auch festsitzende und herausnehmbare Versorgungen

visio.lign®

Systemkomponenten

Aufstellung		Seite
Aufstellwachse und Vorwallsilikone	beauty setup visio.sil	8 8 - 9
Verblendschalen und Vollzähne	novo.lign neo.lign	12 und 14 13 und 15
Verbund		
Befestigungskomposit und Primer	combo.lign MKZ Primer MKZ EM-Aktivator K-Primer visio.link	19 18 18 18 18
Opaker	combo.lign Opaquer (und Katalyst) crea.lign Opaker crea.lign Opaker Z, Zirkonliner	19 19 19
Schichtung		
Malfarben	visio.paint	22
Modellierflüssigkeit	crea.lign Modelling Liquid	22
Komposite / Verblendmaterialien	crea.lign Gel crea.lign Paste crea.lign Stains crea.lign Farbringe	23 23 23 23
Optionen		
System-Sets	Koffer und Mappen visio.lign® Sets novo.lign Sets neo.lign Sets crea.lign Sets Opaker, Malfarben und Ausarbeitungs-Sets	26 - 27 28 - 30 31 32 33 - 36 37
Geräte, Instrumente und Zubehör	bre.Lux Power Unit visio.lign® Toolkit Instrumente/Verbrauchsmaterialien visio.lign® Zahnschrank	40 41 42 - 44 45
Farbkombinations- und Zuordnungstabellen	Material-Verarbeitungs-Matrix Systemkompatible Lichtpolymerisationsgeräte anderer Hersteller bre.Lux Polymerisationszeiten Farbzuordnung: crea.lign Opaker, combo.lign Opaquer crea.lign Dentin zu Enamel	48 49 49 50 50 50

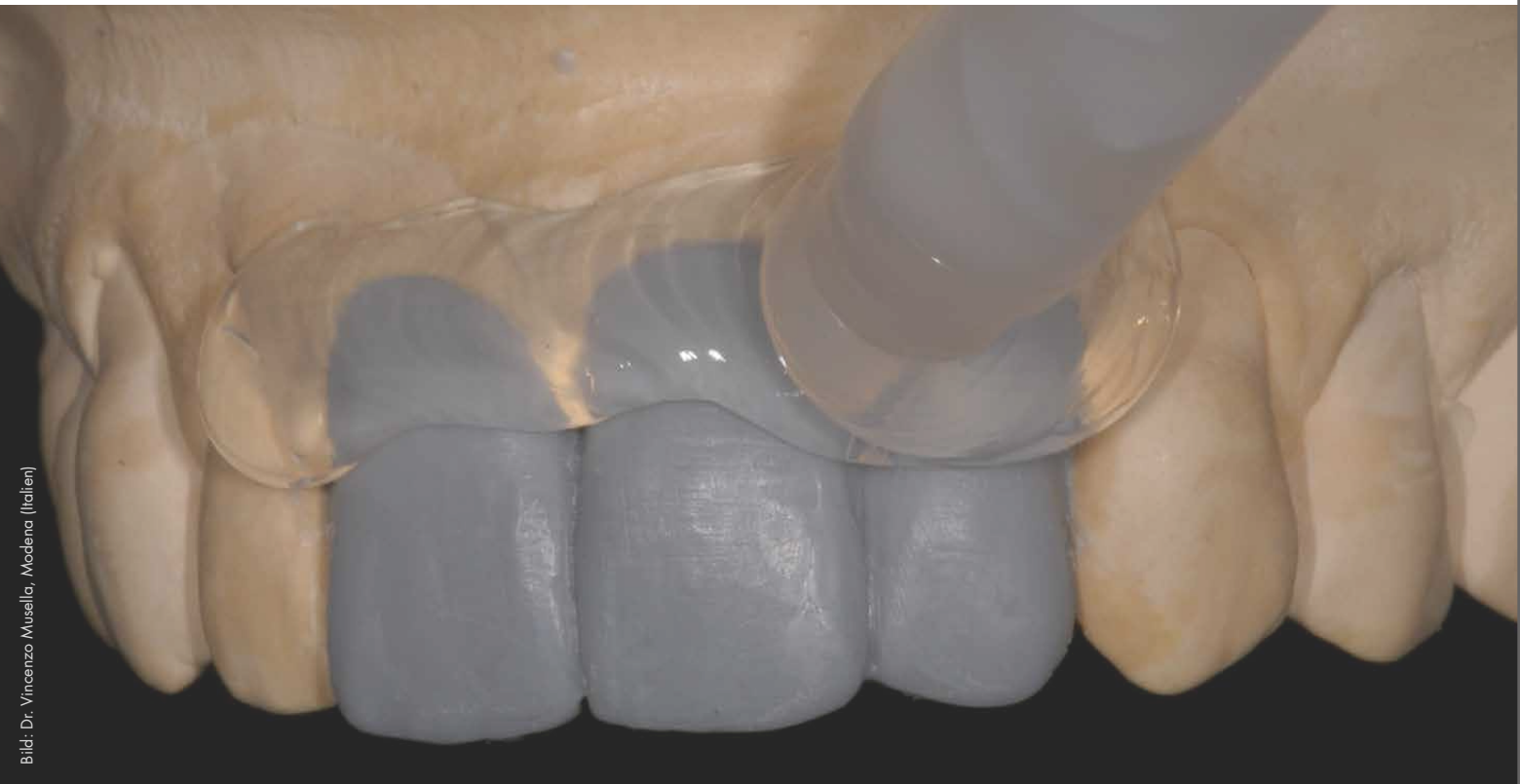

Aufstellwachse und Vorwallsilikone



beauty setup Wachs

dentinfarbenes Fixierwachs für die Ästhetikeinprobe

beauty setup Wachs ist ein für die novo.lign Verblendschalen entwickeltes dentinfarbenes Wachs zum Fixieren der Verblendschalen für die Ästhetikeinprobe.

be. Zwei unterschiedliche Einfärbungen decken durch Mischen die klassische A-D Farbskala ab.



hell



dunkel



visio.sil fix

feinzeichnendes Vorwallsilikon
 Härte ca. 55 ShoreA

visio.sil fix ist ein additionsvernetzendes feinzeichnendes Vorwallsilikon. Mit visio.sil fix können die Interdentalräume und die Zahnfleischmodellierung der Wachsauflage perfekt bis ins Detail

abgeformt werden. Nach der Herstellung der Restauration muss nur noch hochglanzpoliert werden, das erspart Arbeit und Zeit.




gelb



visio.sil

transparentes Vorwallsilikon
Härte ca. 60 ShoreA

visio.sil ist ein transparentes additionsvernetzendes Vorwallsilikon zur Herstellung von lichtdurchlässigen Vorwällen für die Anwendung und Verarbeitung von lichtpolymerisierenden Werkstoffen.

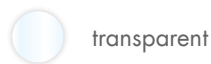

transparent



Vorteil transparente Vorwallsilikone visio.sil und visio.sil ILT

visio.sil und visio.sil ILT Vorwallsilikone sind lichtdurchlässig. Die Aushärtung der zu verklebenden Verblendschalen ist somit ohne Abnahme des Vorwalls möglich.




visio.sil ILT

transparentes Vorwallsilikon für "Inverse Layering Technique"
Härte ca. 75 ShoreA

visio.sil ILT wurde speziell für die Inverse Layering Technik entwickelt. Dieses transparente additionsvernetzende Vorwallsilikon zeichnet sich durch seine große Härte von ca. 75 ShoreA aus. Es ist fließfähig um den Interdentalraum abzuformen und die Oberflächentextur

perfekt abzubilden, dennoch ist es standfest und kann so punktgenau aufgetragen werden.

visio.sil ILT darf in ausgehärtetem Zustand in den Patientenmund (Medizinprodukt Klasse I) eingebracht werden.

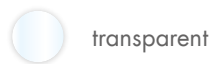



transparent



Vorteil transparentes Vorwallsilikon visio.sil ILT

visio.sil ILT Vorwallsilikon ist zur oralen Anwendung freigegeben und eignet sich zum Positionieren und Verkleben indirekter Veneers.

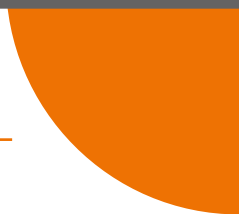

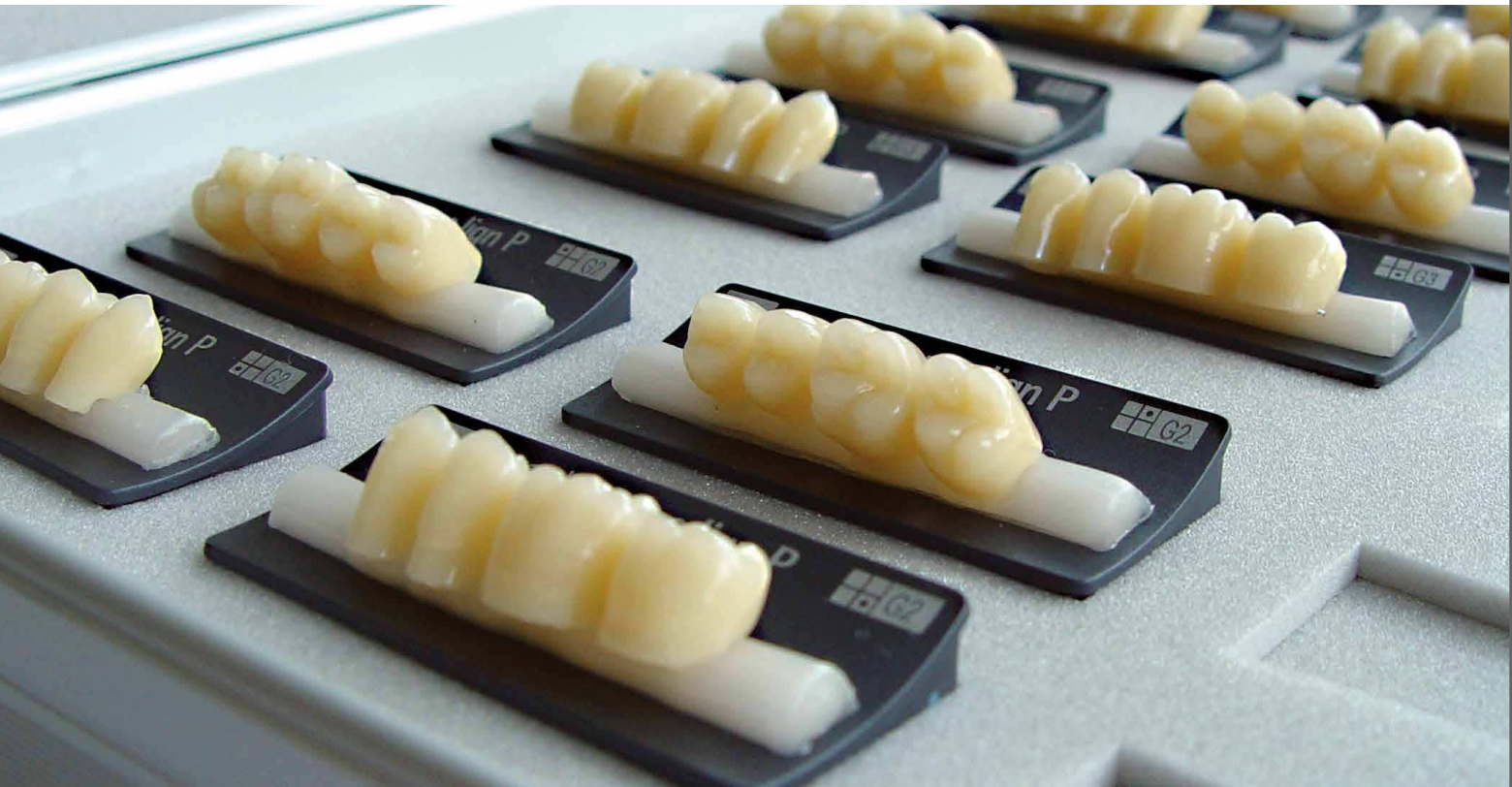

Verblendschalen und Vollzähne

novo.lign Verblendschalen

Farbe, Formen und Schichtgestaltung sind perfekt abgestimmt auf die neo.lign Vollzähne und somit farb- und formgleich kombinierbar.



- Natürliche Ästhetik, nach dem Vorbild der Natur
- Front- und Seitenzähne sind in dünnen Schichten aus high-impact PMMA-Komposit (PMMA = Polymethylmetacrylat) aufgebaut
- Erhältlich in allen klassischen A - D Farben A1 – D4 sowie der Bleach-Farbe BL3
- novo.lign Seitenzähne ermöglichen die Umsetzung jedes Okklusionskonzepts durch das multifunktionelle Kauflächen-Design der G-, W- und L-Formen
- Die „extra“ breiten W-Formen eignen sich gegenüber den „schlanken“ G-Formen zur Verblendung voluminöser Kronen- und Brückengerüste ...
- ... die L-Formen mit „lingualisiertem Kauflächen-Design“ für die Herstellung implantatgetragener totalprothetischer Versorgung

novo.lign A

Anterior / Frontzähne



buccale Wandstärke 1,0 mm

- 12 Oberkiefer Formen
- 3 Unterkiefer Formen

Anterior Formen

auch erhältlich als 4er oder 2er Set

(Verkleinerte Darstellung!)



novo.lign P

Posterior / Seitenzähne

G - Formen



buccale Wandstärke 1,2 mm

- multifunktionales Kauflächen-Design für sämtliche Okklusionskonzepte

L - Formen



buccale Wandstärke 1,0 mm

- lingualisiertes Kauflächen-Design für die Totalprothetik

W - Formen



buccale Wandstärke 0,8 mm

- multifunktionales Kauflächen-Design für sämtliche Okklusionskonzepte
- „extra“ breite zahnatomische Form, besonders empfohlen zur Verblendung von Kronen und Brücken

Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B

neo.lign

Vollzähne

Farbe, Form und Schichtgestaltung sind perfekt abgestimmt auf die novo.lign Verblendschalen und somit optimal kombinierbar.



- Natürliche Ästhetik, nach dem Vorbild der Natur
- Front- und Seitenzähne sind in dünnen Schichten aus high-impact PMMA-Komposit (Polymethylmetacrylat) aufgebaut
- Erhältlich in allen klassischen A - D Farben A1 – D4 sowie der Bleach-Farbe BL3
- neo.lign Seitenzähne ermöglichen die Umsetzung jedes Okklusionskonzepts durch das multifunktionelle Kauflächen-Design der G- und L-Formen
- Mit den neo.lign L-Formen bietet das visio.lign-System „lingualisiertes Kauflächen-Design“ speziell zur Herstellung totalprothetischer Versorgung an

neo.lign A

Anterior / Frontzähne



- 11 Oberkiefer Formen
- 4 Unterkiefer Formen

neo.lign P

Posterior / Seitenzähne

G - Formen



- multifunktionales Kauflächen-Design für sämtliche Okklusionskonzepte

L - Formen



- lingualisiertes Kauflächen-Design für die Totalprothetik

Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

novo.lign

Verblendschalen

Kodierung

Sämtliche Zahnleisten der novo.lign Verblendschalen sind mit silberfarbener Beschriftung bedruckt.

novo.lign heißen alle Verblendschalen innerhalb des visio.lign Verblendsystems.



Übersicht aller novo.lign OK und UK Formen plus Zuordnungstabelle

Kostenloser Download unter www.visio-lign.com oder telefonisch anfordern unter

+49 (0) 7309 / 872 - 22 REF 0002020D

novo.lign A






A steht für **anterior**, darunter fallen alle Oberkiefer- und Unterkieferformen der Frontzähne.

Zahnform, z.B. D49

Zahnfarbe, z.B. A3

novo.lign P

G - Formen

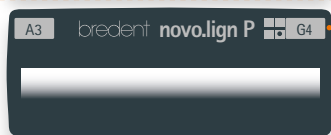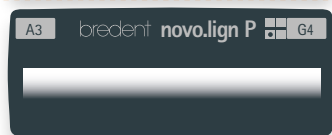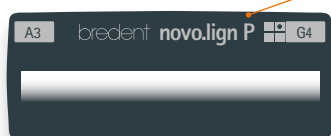





P steht für **posterior**, darunter fallen alle Oberkiefer- und Unterkieferformen der Seitenzahn-Verblendschalen.

Bei den novo.lign P Varianten der Verblendschalen unterscheidet man zwischen **G-Formen**, **W-Formen** und **L-Formen**.

Sowohl die G-Formen als auch die W- und L-Formen gibt es **in mehreren Größen**. Die Größenangabe ist in Ziffern kodiert. Die Größe steigt mit dem Wert der Zahl. Die G-Formen der Verblendschalen sind in den Größen 3 und 4 erhältlich, die W-Formen in den Größen 3, 4 und 5, die L-Formen in den Größen 2 und 3.



➔ Größentabellen siehe Seite 12

W - Formen

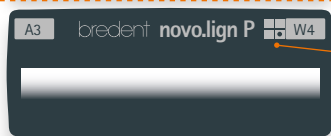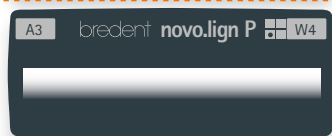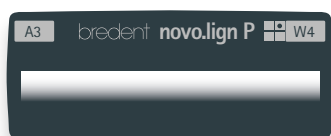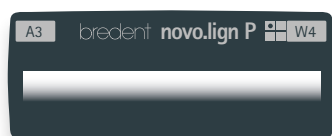

G-, und W-Formen sind **nach Quadranten gruppiert**, d.h. auf einer Zahnleiste sind z.B. Prämolaren und Molaren des Unterkiefers des 3. Quadranten einer Form und Größe, z.B. W4. Auf den Zahnleisten der G-, W- und L-Formen sind alle vier Quadranten in Gestalt von vier kleinen Kästchen dargestellt. Der entsprechende Quadrant ist mit einem Punkt markiert.

L - Formen

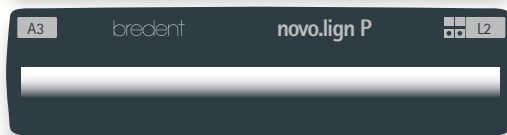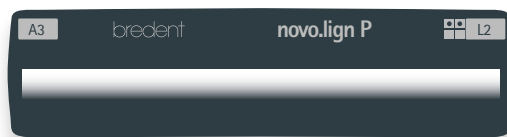

Die L-Formen der novo.lign P Verblendschalen sind in zwei Größen erhältlich, L2 und L3. Eine Zahnleiste ist entweder mit 6 Oberkiefer- (16, 15, 14, 24, 25, 26) oder 6 Unterkiefer-Seitenzähnen (46, 45, 44, 34, 35, 36) bestückt.

neo.lign Vollzähne

Kodierung

Sämtliche Zahnleisten der neo.lign Vollzähne sind mit goldfarbener Beschriftung bedruckt.

neo.lign heißen alle Vollzähne innerhalb des visio.lign Verblendsystems.



Übersicht aller neo.lign OK und UK Formen plus Zuordnungstabelle

Kostenloser Download unter www.visio-lign.com

oder telefonisch anfordern unter

+49 (0) 7309 / 872 - 22 REF 0003290D

neo.lign A




A steht für anterior, darunter fallen alle Oberkiefer- und Unterkieferformen der Frontzähne.

Zahnform, z.B. D48

Zahnfarbe, z.B. B4

neo.lign P G - Formen

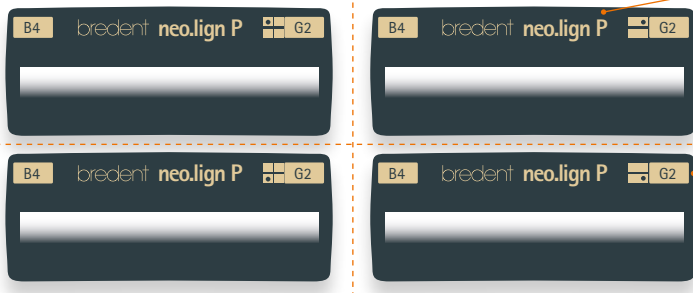

P steht für posterior, darunter fallen alle Oberkiefer- und Unterkieferformen der Seitenzähne.

Bei den neo.lign P Varianten der Seitenzähne unterscheidet man zwischen G-Formen und L-Formen.


Sowohl die G-Formen als auch die L-Formen gibt es in mehreren Größen. Die Größenangabe ist in Ziffern kodiert. Die Größe steigt mit dem Wert der Zahl. Die G-Formen wie auch die L-Formen der Vollzähne sind in den Größen 2, 3 und 4 erhältlich.

➔ Größentabellen siehe Seite 13

G-Formen sind nach Quadranten gruppiert, z.B. Prämolaren und Molaren des Oberkiefers des 1. Quadranten sind auf einer Zahnleiste.

Bei den L-Formen sind die Zahnleisten mit allen Oberkiefer- (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27) bzw. allen Unterkieferzähnen (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37) der jeweiligen Größe bestückt. Auf den Zahnleisten der G- und L-Formen sind alle vier Quadranten in Gestalt von vier kleinen Kästchen dargestellt. Der entsprechende Quadrant ist mit einem Punkt markiert.

L - Formen

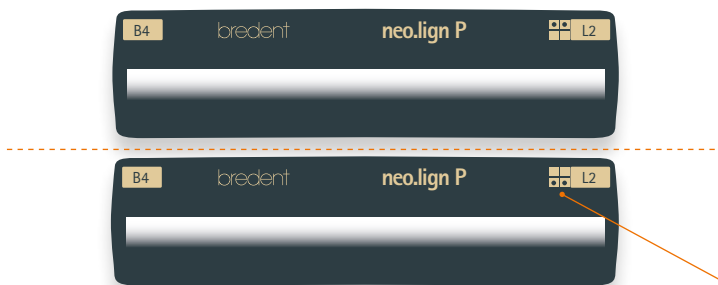

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.



Primer, Opaker und Befestigungskomposit

MKZ Primer



Haftverbund von Komposit
zu Metallgerüsten

- Titan-Legierung
- CoCr (EMF, NEM)-Legierung
- Zirkondioxyd
(Aluminium/Spinellkeramik)

Der MKZ Primer dient der Konditionierung aller metallischer NEM-Legierungen, Titan, Zirkondioxyd, Aluminiumoxyd und Spinellkeramik. So wird der chemische Haftverbund zu Kompositen wie crea.lign hergestellt. Somit ist der MKZ Primer optimal zum Verkleben von individuellen Abutments. MKZ Primer ist intraoral anwendbar.

MKZ EM-Aktivator



Haftverbund von Komposit
zu Edelmetallgerüsten

- Edelmetalllegierung (Au, Ag, Pt, Pd)
- eco-Legierungen
(edelmetallreduzierte Legierungen)

⚠ Nur in Kombination mit MKZ Primer verwenden, siehe Info-Kasten!

Der MKZ EM-Aktivator darf nur in Kombination mit dem MKZ Primer, im Mischungsverhältnis von 1:1 angewendet werden, um Edelmetallgerüste (Au, Ag, Pt, Pd) zu konditionieren, um so den chemischen Haftverbund zu Kompositen wie crea.lign herzustellen. MKZ EM-Aktivator ist intraoral anwendbar.



Vorteile durch Mischen von
MKZ Primer + MKZ EM-Aktivator



Das selbständige Mischen der Komponenten vor der Anwendung hat den Vorteil, dass man selbst mit angebrochenen Fläschchen langfristig ein Gemisch derselben

Zusammensetzung herstellen und somit die nötige Konditionierung erzielen kann.

K-Primer



Haftverbund von Komposit
zu Oxydkeramikgerüsten

- Silikatkeramik
(CAD-Blanks, e-max, Mark II,
Lithiumdisilikat, Glaskeramik)

Der K-Primer stellt den Haftverbund zwischen Verblendkeramik, Presskeramik, e.max press sowie von Silikatkeramik z.B. CAD-Blanks, Mark II zu Kompositen wie crea.lign her. Ideal bei der Reparatur von Keramikverblendungen, da der K-Primer intraoral angewendet werden darf.

visio.link



Haftverbund von Komposit
zu Kunststoffen

- Komposit
(Verblendkomposit/Kompositzähne)
- PMMA-Werkstoffe
- Hochleistungspolymer
(BioXS/BioHPP®)

Universeller, intraoral anwendbarer, lighthärtender PMMA- und Komposit-Primer für optimalen Haftverbund zwischen Prothesenkunststoffen auf PMMA-Basis, high-impact PMMA Komposit-Werkstoffen (novo.lign Verblendschalen/neo.lign Vollzahn/Kunststoffzähne) und combo.lign.




combo.lign Opaquer Katalyst

Keine Lichtpolymerisation zur Aushärtung nötig!
Zur Selbsthärtung combo.lign Opaquer Katalyst
mit der combo.lign Opaquer Farbpaste im Ver-
hältnis 1 : 1 mischen.

combo.lign Opaquer (und Katalyst)

Licht- und selbsthärtender Opaquer, der eine perfekte Aushärtung garantiert.
Farblich abgestimmt auf die Verwendung von combo.lign Befestigungskomposit und novo.lign Verblendschale.
Universitär geprüfetes Verbundsystem, kompatibel zu allen Metallprimern und

Silanisierungsverfahren, optimal bei Verwendung mechanischer Retentionen. Lieferbar in drei Zahn- und einer Zahnfleischfarbe. Dies gewährleistet in Verbindung mit combo.lign Farbstabilität in allen A-D Farben.

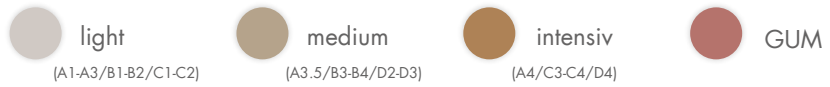

➔ Farbkombinationstabellen siehe Seite 50



combo.lign Befestigungskomposit

Licht- und dualhärtendes Befestigungskomposit für sichere Farbproduktion und optimalen Verbund zwischen der novo.lign Verblendschale und allen Gerüstwerkstoffen.

Lieferbar in den klassischen A-D Farben und der Bleachfarbe BL3.

➔ Klassische Farben A bis D und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12 und 13



crea.lign Opaker

Der lichterhärtende crea.lign Opaker bietet **Farbsicherheit in der Freiform-Schichtung und bei Verwendung der novo.lign Verblendschalen.** Er bildet zusammen mit dem MKZ Primer die Basis für den optimalen Verbund zu den metallischen und keramischen Gerüst-

werkstoffen und somit für randspaltfreie langlebige prothetische Versorgungen. Mit nur 8 Opakern werden alle Farben des klassischen A-D Systems abgedeckt. Ein spezieller Zirkonliner und GUM Opaker sind ebenfalls enthalten.



➔ Farbkombinationstabellen siehe Seite 50




crea.lign Opaker Z, Zirkonliner

Der lichterhärtende Zirkonliner ist ein transparenter Opaker. **Bei Zirkon ist es unbedingt notwendig nach dem passenden Primer (MKZ Primer) den**

Zirkonliner aufzutragen, um den sicheren Haftverbund zwischen Zirkonoxid und Komposit herzustellen.



⚠ Bei eingefärbten Zirkongerüsten scheint die Farbe durch, infolgedessen muss kein herkömmlicher Opaker aufgetragen werden – vorausgesetzt die Farbe des Gerüsts entspricht den klassischen A - D Farben!

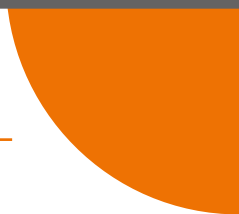



Komposite/Verblendmaterialien, Malfarben und Modellierflüssigkeit

crea.lign Komposit/Verblendmaterial

Vorteile

- rein nanokeramisch gefüllt (Enthält kein Dentalglas!)
- optimale Poliereigenschaften für perfekte Oberflächen
- R_a 0,03 μm (= Mittenrauwert für die Oberflächengüte/-rauheit)
- fließfähig, verbesserte Abdeckung – spaltfreier Übergang zur Verblendschale
- geringe Wasseraufnahme, gewährleistet mechanische Stabilität
- keine Plaqueanlagerung, prädestiniert für implantatgetragene Versorgungen
- lichthärtendes Komposit lieferbar als Gel oder Paste
- Gel in den klassischen A-D Dentinfarben, Schneide, GUM, Modifier, Transpa, Stains und der Bleach-Farbe BL3
- Paste in den klassischen A-D Dentinfarben und der Bleach-Farbe BL3
- lichthärtender crea.lign Opaker in acht Zahnfarben und einer Zahnfleischfarbe für die Frei-Form-Schichtung

➔ crea.lign Opaker siehe Seite 19

➔ crea.lign Zubehör ab Seite 39

➔ Klassische Farben A bis D und Bleach-Farbe BL3, siehe auch Seite 12 und 13

➔ Farbkombinationstabellen siehe Seite 50

visio.paint Malfarben Set

Die flüssigen, lichthärtenden Malfarben visio.paint (white/blue/black/ivory/oher/ebony) werden mittels Cut-Back Technik eingelegt oder direkt appliziert und überschichtet.

Die oberflächliche Bemalung wird nur bei temporären Restaurationen empfohlen. Durch Überschichten mit Komposit bleibt die Farbwirkung erhalten. Mit den visio.paint Malfarben können alle gängigen PMMA Kunststoffe und Komposite intensiviert werden.



white

ivory



blue

ocher



black

ebony

crea.lign Modelling Liquid

Mit crea.lign Modelling Liquid kann die Fließfähigkeit von crea.lign Paste als auch Gel erhöht werden. Durch das Beimischen des Liquids wird auch der Elastizitätsmodul der Massen herabgesetzt und dadurch die Elas-

tizität der crea.lign Massen erhöht. Zudem ermöglicht es bei der Rot-Weiss Individualisierung einen homogenen Übergang vom Prothesenkunststoff zum crea.lign Komposit. crea.lign Massen sind verfärbungs- und plaqueresistent.

⚠ Im Mischungsverhältnis mit crea.lign darf der Modelling Liquid Anteil die 30 % nicht übersteigen.




crea.lign Gel

Gel Enamel und Incisal



crea.lign Incisal (opal/blue/rose/universal) dienen neben den Enamel Massen (E1/E2/E3/E4) zur besonderen Akzentuierung des Incisalbereichs, z.B. um eine Schneide jugendlicher zu gestalten.

Gel GUM

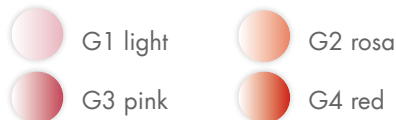

crea.lign GUM (light/rosa/pink/red) sind für Individualisierungen des Zahnfleischanteils, der Zahnersatz wirkt dadurch lebendiger.

Gel Transpa



crea.lign Transpa clear ist die glas-kla-re Variante des crea.lign Komposit mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften und optimalem Verbund zum BioHPP Werkstoff. Durch seine Lichtdurchlässigkeit erlaubt crea.lign Transpa im Zusammenwirken mit den visio.paint Malfarben höchstästhetische transluzente Charakterisierungen - das perfekte Komposit-Verblendmaterial für allerhöchste Ansprüche.

Gel Dentin / Modifier



crea.lign Dentin ist in den klassischen A-D Dentin-Farben und der Bleach-Farbe BL3 erhältlich.



crea.lign Modifier (beige/oliv/caramel/lila/umbra) sind intensiver eingefärbte Massen, z.B. um den Halsbereich zu betonen oder Kalkflecken zu imitieren.

crea.lign Paste

Paste Dentin



Die crea.lign paste Dentin ist die pastöse Variante des crea.lign Komposit. Die crea.lign paste ist ebenfalls rein nanokeramisch gefüllt (Enthält kein Dentalglas!), besitzt hervorragende Poliereigenschaften und kann problemlos in Kombination mit allen anderen crea.lign Massen verarbeitet werden.


Die crea.lign paste ist in den klassischen A-D Dentin-Farben und der Bleach-Farbe BL3 erhältlich.

crea.lign Stains




Die crea.lign Stains (brown/orange) sind lichterhärtende Intensivmassen und werden zur farblichen Individualisierung von Komposit-Verblendungen verwendet. Die crea.lign Stains müssen nicht überschichtet werden, mit ihnen werden z.B. Interdentalräume, Schneidekanten und Fissuren hervorgehoben.

crea.lign Farbringe / shade guides

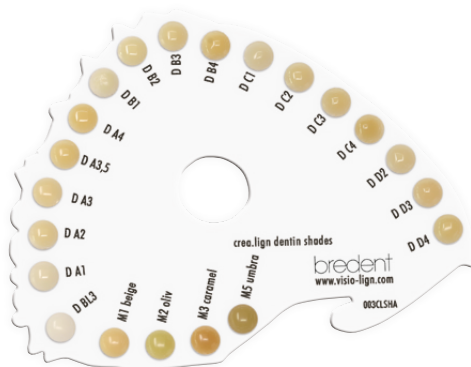

⚠ Farbmuster nicht im Lieferumfang enthalten!

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

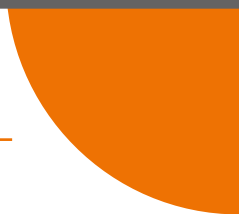



System-Sets

Kunststoff-Koffer Chipping Repair Kit

bestückt für zahntechnische Laboratorien

Rückseite



Vorderseite

- ➔ Artikelliste / Inhalt des Chipping Repair Kits
siehe Seite 36
- ➔ Kunststoff-Koffer ist auch unbestückt erhältlich!
REF CLIGNSETT

Aluminium-Mappe Chipping Repair Kit

bestückt für Zahnarztpraxen



- ➔ Artikelliste / Inhalt des Chipping Repair Kits
siehe Seite 36

Aluminium-Mappe Lebende Formenkarte

für novo.lign Verblendschalen und/oder neo.lign Vollzähne



- ➔ Artikelliste / Inhalt lebende Designkarte novo.lign
siehe Seite 31




- ➔ Artikelliste / Inhalt lebende Formenkarte neo.lign
siehe Seite 32

Aluminium-Mappe Rot-Weiß Ästhetik



➔ Artikelliste / Inhalt
des Rot-Weiß Ästhetiksets
siehe Seite 33

Aluminium-Koffer crea.lign freestyle Komplett-Set

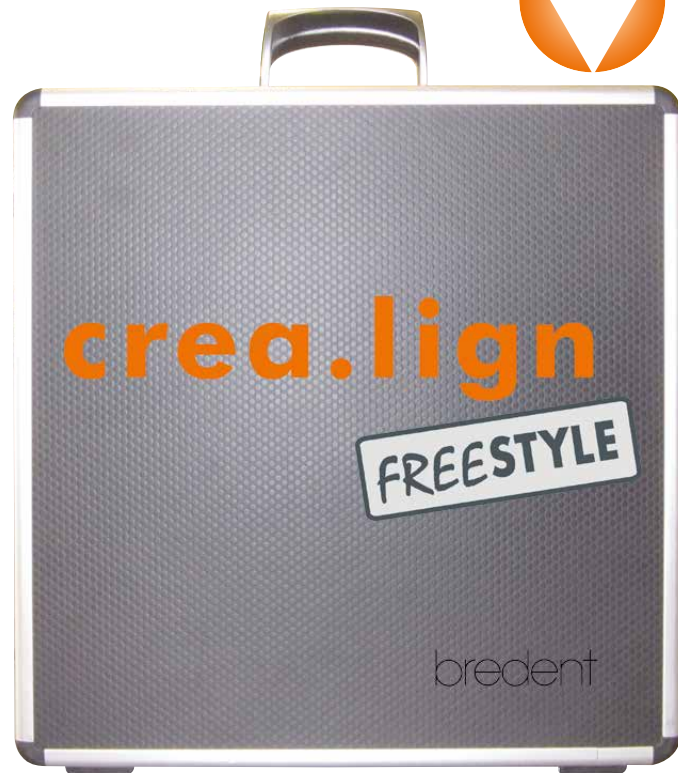


➔ Artikelliste des crea.lign Komplett-Sets siehe Seite 35

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

visio.lign® Sets

REF VLIGNSET2
visio.lign® Starterkit 2

visio.lign® Zahnschrank/Box

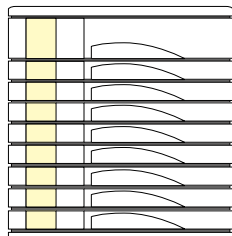


1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne



10 Zahnleisten

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne

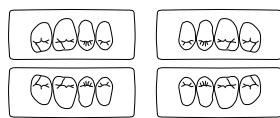

8 Zahnleisten

visio.link, 10 ml



1 x

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2



1 x 10

combo.lign Befestigungskomposit, 8 g



1 x

 Sortiment in einer Farbe nach Wahl

 ➔ Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

 novo.lign A und P Zahnleisten
 Front- und Seitenzahnverblendschalen-
 Formen nach Wahl

 ➔ siehe **i**-Box


 novo.lign P Zahnleisten
 Seitenzahnverblendschalen-Formen
 nach Wahl

➔ Größentabellen siehe Seite 12


 Übersicht aller novo.lign OK und
 UK Formen plus Zuordnungstabelle

 Kostenloser Download unter www.visio-lign.com
 oder telefonisch anfordern unter
 +49 (0) 7309 / 872 - 22 **REF 0002020D**
REF VLIGNSET3
visio.lign® Starterkit 3

visio.lign® Zahnschrank / Box

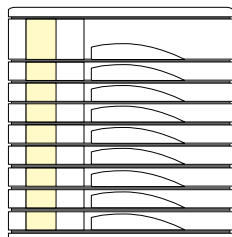


1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne



13 Zahnleisten

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne

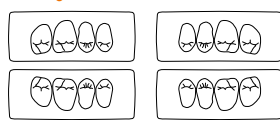

8 Zahnleisten

Einhandgriff crea.lign Gel




2 x

visio.link, 10 ml



1 x

crea.lign Opaker, 4 g

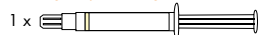

1 x

Pin Cover



1 x 10

Applikationskanüle



1 x 10

crea.lign Gel, 5g



2 x

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2



1 x 10

combo.lign Befestigungskomposit, 8 g



1 x

 Sortiment in einer Farbe nach Wahl

 ➔ Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

 novo.lign A und P Zahnleisten
 Front- und Seitenzahnverblendschalen-
 Formen nach Wahl

 ➔ siehe **i**-Box

 novo.lign P Zahnleisten
 Seitenzahnverblendschalen-Formen
 nach Wahl

➔ Größentabellen siehe Seite 12


 crea.lign Gel Incisal und
 Dentin Farben nach Wahl
 ➔ Farben siehe Seite 23

 Einhandgriff nach Wahl
 ➔ mit oder ohne UV-LED
 siehe Seite 43

visio.lign® Sets

REF VLIGNSET4 visio.lign® Starterkit 4

visio.lign® Zahnschrank / Box

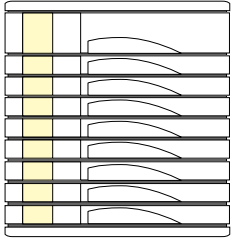

1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne




26 Zahnleisten

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne



24 Zahnleisten

Einhandgriff crea.lign Gel

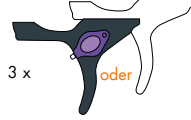

3 x



1 x

Sortiment in zwei Farben nach Wahl

→ Klassische A bis D Farben und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12 und 13

novo.lign A und P Zahnleisten Front- und Seitenzahnverblendschalen-Formen nach Wahl

→ siehe i-Box

novo.lign P Zahnleisten Seitenzahnverblendschalen-Formen nach Wahl

→ Größentabellen siehe Seite 12


crea.lign Gel Incisal und Dentin Farben nach Wahl

→ Farben siehe Seite 23

Einhandgriff nach Wahl

→ mit oder ohne UV-LED siehe Seite 43

crea.lign Opaker, 4 g

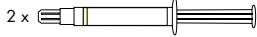


2 x

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2



1 x 10

Mischkanüle grün, Gr. 4

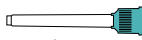

1 x 12

MKZ Primer, 4 ml




1 x

Pin Cover




1 x 10

Applikationskanüle

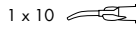


1 x 10

crea.lign Gel, 5g

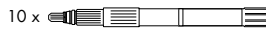


10 x

combo.lign Befestigungskomposit, 8 g

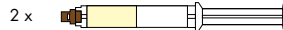

2 x

visio.sil Vorfallsilikon, 50 ml

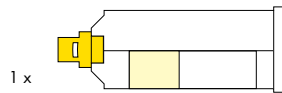

1 x


Modelling Liquid, 10 ml



1 x


REF VLUPSETN visio.lign® Upgrade Set N

crea.lign Opaker, 4 g

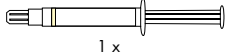

1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne

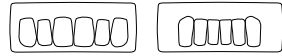

13 Zahnleisten

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne



12 Zahnleisten

crea.lign Gel, 5g



1 x

Sortiment in einer Farbe nach Wahl

→ Klassische A bis D Farben und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12 und 13

novo.lign A und P Zahnleisten Front- und Seitenzahnverblendschalen-Formen nach Wahl

→ siehe i-Box


novo.lign P Zahnleisten Seitenzahnverblendschalen-Formen nach Wahl

→ Größentabellen siehe Seite 12

crea.lign Gel nach Wahl


→ Übersicht siehe Seite 23

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2

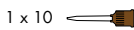

1 x 10

combo.lign Befestigungskomposit, 8 g

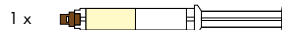

1 x

visio.lign® Sets

REF VLIGNPRVC
visio.lign® Set PRVC

visio.lign® Aluminium-Mappe



1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne



1 Zahnleiste OK

1 Zahnleiste UK

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne



2 Zahnleisten OK

2 Zahnleisten UK

Applikationskanüle

8 x

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2

1 x 10

combo.lign Befestigungskomposit, 8 g

1 x


MKZ Primer, 4 ml

1 x

Modelling Liquid, 10 ml

1 x

crea.lign Farbring / Shade guide (befüllt)

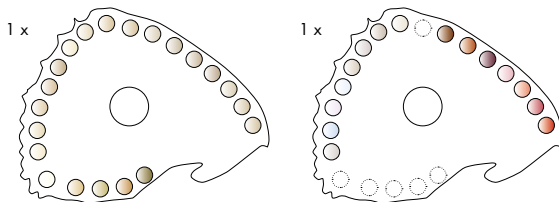

1 x


1 x

Einhandgriff crea.lign Gel



1 x

visio.link, 10 ml

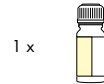

1 x

crea.lign Gel, 5g

8 x

crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

combo.lign Opaquer, 4 g

1 x

combo.lign Katalyst, 4 g

1 x

Sortiment in einer Farbe nach Wahl

 ➔ Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

novo.lign A und P Zahnleisten

Front- und Seitenzahnverblendschalen-

Formen nach Wahl

➔ siehe i-Box

novo.lign P Zahnleisten

Seitenzahnverblendschalen-Formen

nach Wahl

➔ Größentabellen siehe Seite 12

crea.lign Gel und Stains nach Wahl

➔ Übersicht siehe Seite 23

combo.lign Opaquer

Farben nach Wahl

➔ Farben siehe Seite 19

Einhandgriff nach Wahl

 ➔ mit oder ohne UV-LED
 siehe Seite 43

novo.lign Sets

REF VLIGNPRVN novo.lign A & P Lebende Formenkarte

visio.lign® Aluminium-Mappe




1 x

novo.lign A Verblendschalen - Frontzähne



12 x

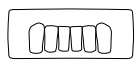

3 x

= 15 Zahnleisten:
1 Zahnleiste je Form
→ siehe i-Box

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne



5 x



5 x


= 20 Zahnleisten:
je G- und W-Form
in den Größen:
G3, G4 und W3, W4, W5.




5 x



5 x

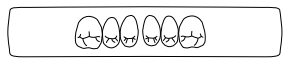

1 x

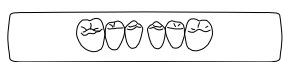

1 x

= 4 Zahnleisten:
je 1 x L-Form
in den Größen:
L2 und L3

Sortiment in einer Farbe nach Wahl

→ Klassische A bis D Farben
und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
und 13

novo.lign A und P Zahnleisten,
Front- und Seitenzahnverblendschalen-
Formen

→ siehe i-Box

novo.lign P Zahnleisten
Seitenzahnverblendschalen-Formen
nach Wahl


→ Größentabellen siehe Seite 12

REF VLIGNSETP novo.lign P Upgrade Set

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne




4 x

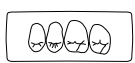

4 x



4 x

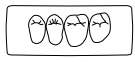

4 x

16 Zahnleisten

Sortiment in zwei Farben nach Wahl

→ Klassische A bis D Farben
und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
und 13

novo.lign A und P Zahnleisten
nach Wahl (Seitenzahnverblendschalen
wählbar aus den G- und/oder W-
Formen)

→ Größentabellen novo.lign P siehe
Seite 12 bzw. alle Formen novo.lign A
und P siehe i-Box



Übersicht aller novo.lign OK und
UK Formen plus Zuordnungstabelle

Kostenloser Download unter www.visio-lign.com
oder telefonisch anfordern unter
+49 (0) 7309 / 872 - 22 REF 0002020D

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

neo.lign Sets


REF VLIGNPRVT
neo.lign A & P Lebende Formenkarte

visio.lign® Aluminium-Mappe



1 x

neo.lign A Vollzähne - Frontzähne

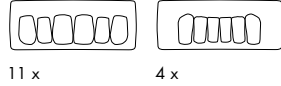


11 x

4 x

 = 15 Zahnleisten:
 1 Zahnleiste je Form
 → siehe i-Box

neo.lign P Vollzähne - Seitenzähne G-Formen

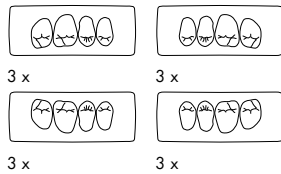


3 x

3 x

 = 12 Zahnleisten:
 je 1 x G-Form in den Größen:
 G2, G3 und G4

neo.lign P Vollzähne - Seitenzähne L-Formen

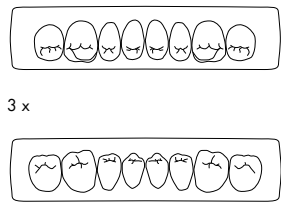


3 x

3 x

 = 6 Zahnleisten:
 je 1 x L-Form in den Größen:
 L2, L3 und L4

REF NL28for28
neo.lign 28er Set (Nur gültig für Deutschland und lediglich 1 x pro Kunde!)

neo.lign A Vollzähne - Frontzähne

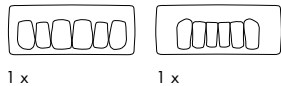


1 x

1 x

 = 2 Zahnleisten:
 Frontzahnformen nach Wahl
 → siehe i-Box

neo.lign P Vollzähne - Seitenzähne L-Formen

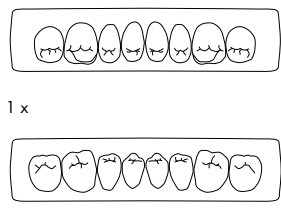


1 x

1 x

 = 2 Zahnleisten:
 Seitenzähne je 1 x in L-Form
 wählbar aus den Größen:
 L2 / L3 / L4


REF NLUPSET2
neo.lign A & P Upgrade Set

neo.lign A Vollzähne - Frontzähne

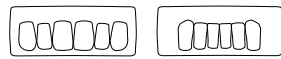


= 12 Zahnleisten

neo.lign P Vollzähne - Seitenzähne G-Formen

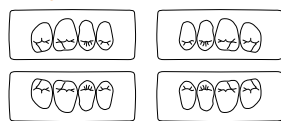

= 12 Zahnleisten

neo.lign P Vollzähne - Seitenzähne L-Formen

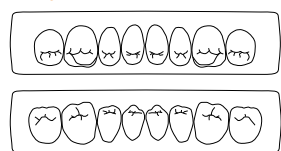
 Übersicht aller neo.lign OK und
 UK Formen plus Zuordnungstabelle

 Kostenloser Download unter www.visio-lign.com
 oder telefonisch anfordern unter
 +49 (0) 7309 / 872 - 22 **REF 0003290D**

 Sortiment in einer Farbe nach Wahl
 → Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

 neo.lign A und P Zahnleisten
 Front- und Seitenvollzähne-Formen nach
 Wahl

→ siehe i-Box

 neo.lign P Zahnleisten
 Seitenvollzähne-Formen
 → Größentabellen siehe Seite 13

 Sortiment in einer Farbe nach Wahl
 → Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

 neo.lign P Zahnleisten
 Seitenvollzähne-Formen
 → Größentabellen siehe Seite 13

 Sortiment in einer Farbe nach Wahl
 → Klassische A bis D Farben
 und Bleach-Farbe BL3, siehe Seite 12
 und 13

 neo.lign A und P Zahnleisten
 Front- und Seitenvollzähne-Formen nach
 Wahl


→ siehe i-Box

 neo.lign P Zahnleisten
 Seitenvollzähne-Formen
 → Größentabellen siehe Seite 13

crea.lign Sets


REF CLIGNSET12 crea.lign Starterkit mit Spritzenhalter

crea.lign Spritzenhalter
Kunststoff

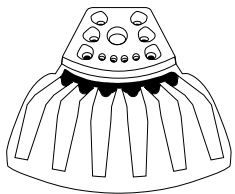

1 x

Einhandgriff crea.lign Gel

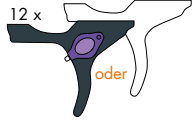

Pin Cover
2 x 10


Applikationskanüle
2 x 10

Modelling Liquid, 10 ml



1 x

crea.lign Stain, 1,4 g

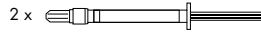

2 x

crea.lign Gel, 5g



12 x

crea.lign Stains und Gel
Farben nach Wahl


→ siehe Seite 23

Einhandgriff nach Wahl

→ mit oder ohne UV-LED
siehe Seite 43

REF CLIGNSETN crea.lign Starterkit N

Einhandgriff crea.lign Gel

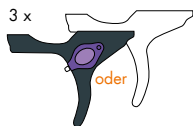

3 x

crea.lign Gel, 5g



10 x

crea.lign Gel
Farben nach Wahl

→ siehe Seite 23

Einhandgriff nach Wahl

→ mit oder ohne UV-LED
siehe Seite 43


REF CLIGNSETG Rot-Weiß Ästhetikset

Aluminium-Mappe



1 x

Modelling Liquid
10 ml

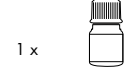

1 x

visio.link



1 x

Demoprothese



2 x

Applikationskanüle



8 x

Anmischblock, groß



1 x

Einhandgriff crea.lign Gel



1 x


crea.lign Gel Incisal, 5g



Einhandgriff nach Wahl
→ mit oder ohne UV-LED
siehe Seite 43


1 x I1 opal
1 x I2 blue

crea.lign Gel Modifier, 5g

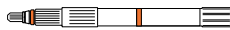


1 x M1 beige
1 x M4 lila

crea.lign Gel GUM, 5g

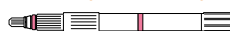


1 x G1 light
1 x G2 rosa
1 x G3 pink
1 x G4 red

combo.lign Opaquer, 4 g

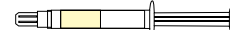

1 x GUM

Schichtanleitung

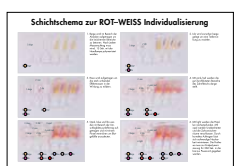

1 x

Pinsel Magic Brush Nr. 2




2 x

Abbildungen nicht maßstabgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

crea.lign Sets

REF CLIGNSETFN crea.lign freestyle Set FN

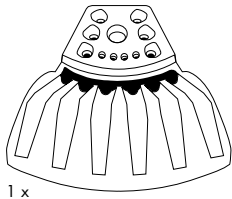 crea.lign Spritzenhalter
Kunststoff


1 x

Modelling Liquid

10 ml

1 x



Pin Cover

2 x 10



Applikationskanüle

2 x 10



Einhandgriff crea.lign Gel




9 x

oder


crea.lign Gel Incisal, 5g

6 x

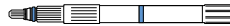


crea.lign Gel Modifier, 5g

2 x

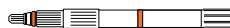


crea.lign Gel Dentin, 5g

17 x

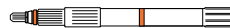


crea.lign Stain, 1,4 g

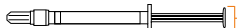

1 x S1 orange

1 x S2 brown

crea.lign Opaker, 4 g

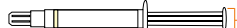

1 x Farbe 1

1 x Farbe 4

1 x Farbe 7

1 x Farbe 2

1 x Farbe 5

1 x Farbe 8

1 x Farbe 3

1 x Farbe 6

1 x GUM

 crea.lign Incisal und Modifier
Farben nach Wahl

➔ siehe Seite 23

 crea.lign Dentin
in den 16 klassischen A-D Farben,
plus 1 x Bleach-Farbe BL3

➔ siehe Seite 12 und 13

 crea.lign Opaker
Farbzuordnungstabelle

➔ siehe Seite 50

Einhandgriff nach Wahl

 ➔ mit oder ohne UV-LED
siehe Seite 43

REF CLPNSET7 crea.lign Starterkit Paste 7 Farben

 1 x A2
1 x A3
1 x A3,5

 1 x B2
1 x B3
1 x C3
1 x D3

crea.lign Paste Dentin, 3g



Drehschieber



7 x

Informationen zu crea.lign Paste

➔ siehe Seite 23

crea.lign freestyle Test Set

REF CLFKSETA20

A2

oder

REF CLFKSETA30

A3

oder

REF CLFKSETA35

A3,5

1 x crea.lign Gel Dentin, 5g




1 x crea.lign Paste Dentin, 3g



1 x crea.lign Gel Incisal, 5g



1 x crea.lign Opaker, 4 g

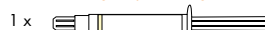
 crea.lign Gel Incisal und crea.lign
Opaker im Set werden passend zur ge-
wählten Sortimentsfarbe (A2, A3 oder
A3.5) geliefert.

crea.lign Sets

REF CLIGNSETFK crea.lign freestyle Komplett-Set

Aluminium-Koffer,
Breite 42,5 cm x Höhe 43,5 cm x Tiefe 20,5 cm



Modelling Liquid

10 ml

1 x



visio.link

10 ml

1 x



Einmalschälchen

1 x 12



Anmischblock
klein

2 x



MKZ Primer

4 ml

1 x



MKZ EM-Aktivator

4 ml

1 x



K-Primer

3 ml

1 x



Spatel

1 x



Sortiment beinhaltet alle
erhältlichen Farben
folgender Komponenten:

- crea.lign Opaker
- crea.lign Paste
 - Dentin (Nur Dentin erhältlich!)
- crea.lign Gel
 - Incisal
 - Transpa clear
 - Dentin
 - Modifier
 - GUM
- crea.lign Stain
- visio.paint

➔ siehe Seite 19, 22 und 23

Primer und Aktivator


➔ siehe Seite 18

Einhandgriff nach Wahl

➔ mit oder ohne UV-LED
siehe Seite 43

crea.lign Spritzenhalter
Edelstahl

2 x

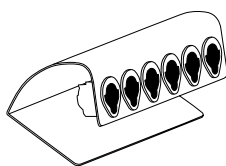

Einmalpinsel

20 x



Pinselhalter

1 x



crea.lign Paste Dentin, 3g

17 x




Drehschieber

17 x




crea.lign Farbring dentin shade
(unbefüllt)

1 x

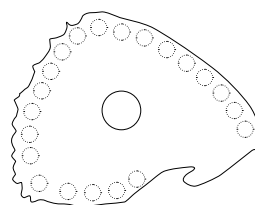

Einhandgriff crea.lign Gel

12 x

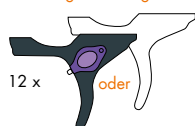

Pin Cover

2 x 10



Applikationskanüle

2 x 10




crea.lign Gel Incisal, 5g

8 x




crea.lign Gel Transpa clear, 5g

1 x

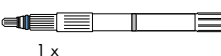

crea.lign Farbring Incisal, Stains & GUM
(unbefüllt)

1 x

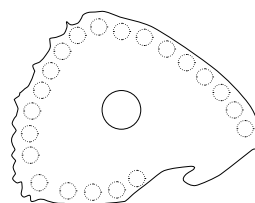

visio.paint Set


3 ml

1 x 6



crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

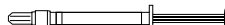

crea.lign Opaker, 4 g

10 x




crea.lign Gel Dentin, 5g

17 x




crea.lign Gel Modifier, 5g

5 x

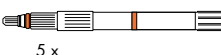

crea.lign Gel GUM, 5g


4 x

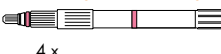

visio.lign Infomappe

mit diversen Print-Utensilien, wie z.B. crea.lign Freestyle Manual
und Tischaufsteller mit bebildelter Schichtenanleitung.

1 x

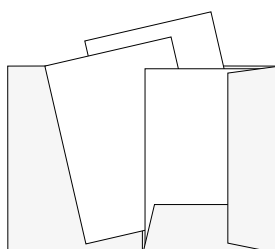


visio.lign Infomappe
mit diversen Print-Utensilien

Kostenlos telefonisch anfordern unter
+49 (0) 7309 / 872 - 22 REF 0090060D

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

crea.lign Sets


REF CLIGNSETFH crea.lign freestyle Set FH

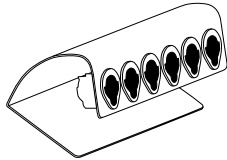 crea.lign Spritzenhalter
 Edelstahl


1 x

 Pin Cover
 2 x 10

crea.lign Opaker, 4 g

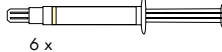

6 x

crea.lign Paste Dentin, 3g




8 x

Applikationskanüle



2 x 10

Einhandgriff crea.lign Gel

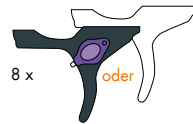

8 x

Drehschieber



8 x

 crea.lign Opaker
 Farben nach Wahl
 → siehe Seite 19

 crea.lign Paste und Gel
 Farben nach Wahl
 → siehe Seite 23

 Einhandgriff nach Wahl
 → mit oder ohne UV-LED
 siehe Seite 43

crea.lign Gel Incisal, 5g



6 x

crea.lign Gel Modifier, 5g



2 x

REF CLIGNSETA Chipping Repair Kit, Zahnarzt

Aluminium-Mappe



1 x

MKZ Primer

4 ml

1 x



MKZ EM-Aktivator

4 ml

1 x



crea.lign Paste Dentin, 3g


 1 x A2
 1 x A3

K-Primer

3 ml

1 x




Drehschieber



8 x

Einleger Verarbeitungsanleitung

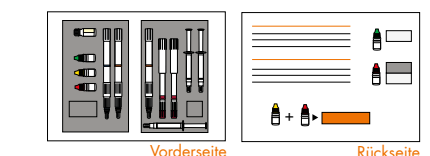

1 x

Vorderseite

Rückseite

Einmalschälchen

1 x 12



Pin Cover

1 x 10



Applikationskanüle

1 x 10




crea.lign Gel Incisal, 5g



1 x E1

crea.lign Opaker, 4 g

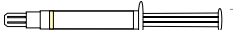
 1 x Farbe 2
 1 x Farbe 3

visio.link

10 ml

1 x




crea.lign Gel Dentin 5g



1 x A2

1 x A3

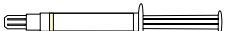 crea.lign Opaker Z,
 Zirkonliner 4 g


1 x

REF CLIGNSETT1 Chipping Repair Kit, Zahntechnik

Kunststoff-Koffer



1 x

MKZ Primer

4 ml

1 x



MKZ EM-Aktivator

4 ml

1 x



visio.link

10 ml

1 x



K-Primer

3 ml

1 x




Einmalschälchen

1 x 12



Übersicht Primer - Indikationen und Anwendung

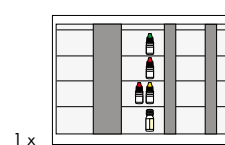


1 x


Opaker Sets

REF OLIGNSET1 combo.lign Opaquer Set

combo.lign Katalyst, 4 g

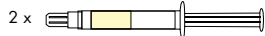

combo.lign Opaquer, 4 g

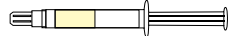

- 1 x light
1 x medium
1 x intensiv
1 x GUM

combo.lign Opaquer
und Katalyst

→ siehe Seite 19




**Die Schreibweise Opaquer
ist beabsichtigt - kein Fehler!**

Die Schreibweise „Opaquer“ im Gegensatz
zu „Opaker“ dient im visio.lign-System als
zusätzliches Unterscheidungsmerkmal zwischen
crea.lign Opaker und combo.lign Opaquer.

REF CLFHOPSET crea.lign Opaker Set

crea.lign Opaker, 4 g

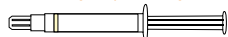


- 1 x Farbe 1
1 x Farbe 2
1 x Farbe 3
1 x Farbe 4
1 x Farbe 5
1 x Farbe 6
1 x Farbe 7
1 x Farbe 8
1 x GUM

crea.lign Opaker

→ siehe Seite 19

visio.paint Malfarben Set

Einmalpinsel

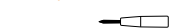

Pinselhalter



visio.paint

3 ml



- 1 x white
1 x blue
1 x black
1 x ivory
1 x ocher
1 x ebony

visio.paint

→ siehe Seite 22

Anmischblock

klein

1 x




REF 54001250

visio.lign® Toolkit Komposit-Ausarbeitungsset

→ siehe Seite 41

REF VLTOOLKIT

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

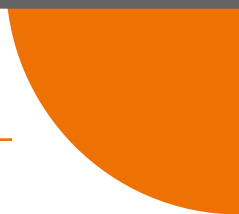



Geräte, Instrumente und Zubehör

bre.Lux Power Unit



Polymerisations-Multitalent für Praxis und Labor.

Für die Verarbeitung von Verblendmaterialien und dentalen Werkstoffen waren bisher mehrere Geräte notwendig. Mit der bre.Lux Power Unit wird erstmals die Verarbeitung aller gängigen Werkstoffe mit nur einem Geräte-Konzept realisiert.

Geballte LED-Power auch handlich


Bei der bre.Lux Power Unit handelt es sich um ein LED Lichtpolymerisationsgerät mit insgesamt 21 Power LED's die einen Wellenlängenbereich von 370 - 500 nm abdecken. Die LED's verfügen über eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden. Ebenso ist die Handlampe bre.Lux LED N (mit Spiralkabel) mit einem Leistungsbereich von 370 - 500 nm ausgestattet.

Vorteile der bre.Lux Power Unit

- Fixierung/Anhärtung/Zwischenpolymerisation und finale Durchhärtung direkt am Arbeitsplatz in einem Gerät
- 370 - 500 nm decken den notwendigen Wellenlängenbereich ab, auch für die Handlampe
- Leistungsverzögerung und Reduktion maximieren die Eigenschaften und Ergebnisse dentaler Werkstoffe
- Anlaufverzögerung und Polymerisationszeit lassen sich einfach kombinieren
- großes Volumen für 2 Modelle, optimal und gleichmäßig ausgeleuchtet
- verfügt über einen Flexschlauch mit Aufnahmering für die Handlampe - dieser dient als dritte Hand und ermöglicht ein zweihändiges Arbeiten

- ➔ Anwendungsbeispiel Handlampe siehe Seite 39
- ➔ bre.Lux Polymerisationszeiten siehe Seite 49

visio.lign® Toolkit

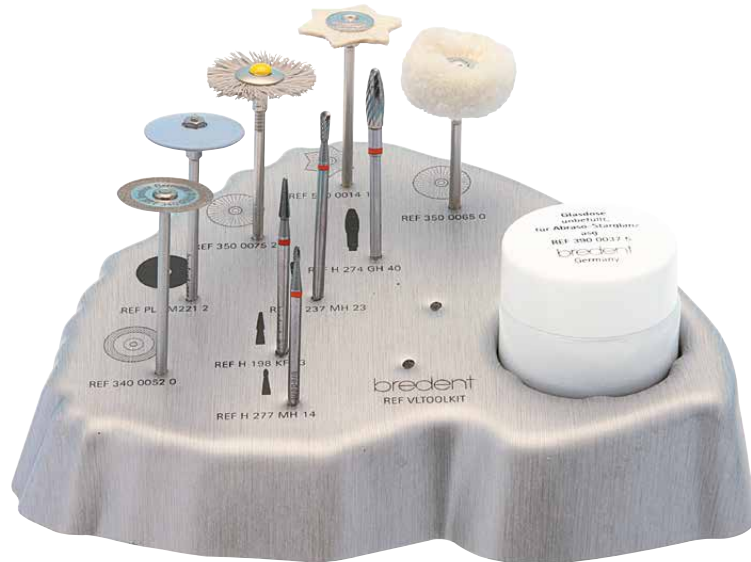

The "Finishing Touch"

Das visio.lign Toolkit ist für die Ausarbeitung von Kompositen, wie z. B. visio.lign Verblendungen, optimiert und bietet Instrumente und Polierpasten für ein perfektes Finishing.

Komposit-Oberflächen wie Keramik

Durch die Bearbeitung der Materialien des visio.lign Verblendsystems mit dem visio.lign Toolkit lassen sich plaque-resistente-farbstabile Oberflächen in der Qualität und Beständigkeit einer Keramikoberfläche erzielen.

Vorteile des visio.lign® Toolkit

- Fräsen mit Hinterschliff sorgen für eine glatte Oberfläche und weniger Polieraufwand
- Vorpolier- und Hochglanzpolierpaste sind im Set enthalten
- Unterschiedlich hohe Werkzeuganordnung, um diese besser greifen zu können
- Herausnehmbare Glasdose, um das Austrocknen der Hochglanzpolierpaste zu verhindern
- Aufgedruckte Piktogramme und Bestellnummern zur besseren Übersichtlichkeit
- drei freie Plätze für weitere Instrumente

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Instrumente und Verbrauchsmaterialien

crea.lign Spritzenhalter
Edelstahl



Edelstahl Spritzenhalter mit Kunststoffführung unbestückt für bis zu 6 crea.lign Spritzen.

crea.lign Spritzenhalter
Kunststoff




Im crea.lign Spritzenhalter können bis zu 12 crea.lign Spritzen inklusive des Einhandgriffes aufgenommen werden.

Einmalpinsel



Einmalpinsel passend für Pinselhalter.

Pinselhalter

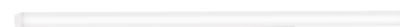

Pinselhalter dienen der Aufnahme von Einmalpinsel.

Spatel



Spatel dient dem Anmischen und groben Auftragen von Materialien.

Einmalschälchen



Finger groß mit geringem Volumen, für das sparsame Aufnehmen der visio.lign Primer (MKZ Primer, K-Primer, MKZ EM-Aktivator und visio.link)

Anmischblock groß



100 mm x 100 mm
100 Blatt

Anmischblock klein




50 mm x 35 mm
100 Blatt

Instrumente und Verbrauchsmaterialien

Drehschieber crea.lign Paste



Drehschieber für alle crea.lign Pasten, zum leichten und gezielten Austragen

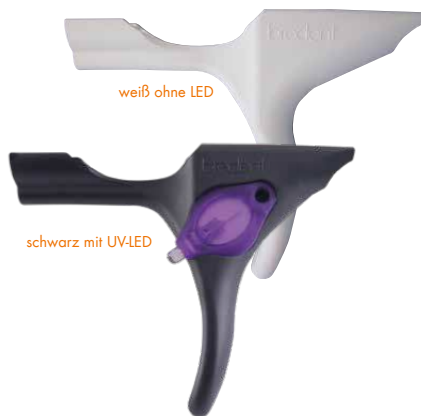

Einhandgriff crea.lign Gel

Einhandgriff für alle crea.lign Gel 5g Spritzen, zum leichten und gezielten Austragen

Applikationskanülen

Lichtundurchlässige Applikationskanüle passend für alle crea.lign 5 g Spritzen



Pin Cover

Lichtundurchlässige Schutzkappe, passend auf alle Applikationskanülen



Thermo-Pen

Der Thermo-Pen ist ein Heißluftgebläse mit Piezo-Technik ohne offene Flamme. Somit können die Verblendschalen erhitzt werden, ohne Gefahr zu laufen, dass diese verbrennen. Die notwendige

Temperatur um die Verblendschalen zu verformen liegt bei ca. 250° C. Durch das Aufdehnen können z. B. Teleskopkronen besser abgedeckt werden.



Wir empfehlen Thermo-Pen zur thermoplastischen Verformung

1. Verblendschale erhitzen

①



2. Heiße Verblendschale aufbiegen

②



Einhandgriff + Applikationskanüle für crea.lign Gel Spritzen

Der Einhandgriff ist speziell für die crea.lign Gel Spritzen konzipiert und erleichtert in Verbindung mit der Applikationskanüle dem Anwender das exakte Dosieren mit einer Hand. Durch den Einhandgriff liegt die Spritze sauber in der Handfläche und das flüssige Gel kann durch Drehen der geriffelten Drehvorrichtung mit Daumen oder Zeigefinger derselben Hand dosiert werden. Die andere Hand bleibt frei für andere Arbeiten, z.B. das Halten des zu bearbeitenden Objekts.



Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Instrumente und Verbrauchsmaterialien



Dispenser combo.lign Befestigungskomposit

Austragegerät für alle combo.lign Kartuschen, zum leichten und gezielten Austragen des combo.lign Befestigungskomposit.

⚠ Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten.



Mischkanülen combo.lign Befestigungskomposit

Lichtundurchlässige Mischkanüle für alle combo.lign Befestigungskomposite



Dispenser visio.sil Silikone

Austragegerät für visio.sil, visio.sil ILT und visio.sil fix Kartuschen, zum leichten und gezielten Austragen des Silikons.

⚠ Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten.



Mischkanülen für visio.sil fix Silikon Größe 1

Mischkanüle für feinzeichnendes Vorwandsilikon.




Mischkanülen für visio.sil und visio.sil ILT Silikone Größe 4

Mischkanüle für die transparenten visio.sil Silikone.

visio.lign® Zahnschrank / Box



Schubladeneinsätze für

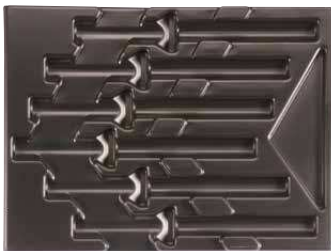

6 x combo.lign Opaquer Spritze



9 x crea.lign Opaker und / oder crea.lign paste Spritze



24 x novo.lign P und / oder neo.lign P Zahnleisten



36 x novo.lign A und / oder neo.lign A Zahnleisten



10 x crea.lign Gel Spritze
3 x Einhandgriff



8 x crea.lign Gel und / oder crea.lign paste Spritze
2 x Haftverbund-Liquid Fläschchen
1 x Silikonkartusche

Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

	Werkstoff-Beschreibung			
	Produkt	Produkt-Beschreibung	Produkt-Beschreibung	Produkt-Beschreibung
visio.all				
visio.all 95				
AKZ Primer				
AKZ 600 Aktivator				
K-Primer				
visio.link				
bre.lux				
Power.Ultra				
Gnathoflex				
crea.lign				
combo.lign				
crea.lign				
combo.lign				
novo.lign				
crea.lign				
Gel				
crea.lign				
Paste				
visio.paint				
visio.lign.T				

Kombinations- und Zuordnungstabellen

Material-Verarbeitungs-Matrix

	Verarbeitung			
	Verblenden mit Verblendschale	Frei-Form-Schichtung	Frei-Form-Schichtung mit Gnathoflex	Frei-Form-Schichtung in Vorwall
Material	•			
beauty setup	•			
visio.sil fix	•			
visio.sil	•			
visio.sil ILT	•			•
MKZ Primer	•	•	•	•
MKZ EM-Aktivator	•	•	•	•
K-Primer	•	•	•	•
visio.link	•	•	•	•
bre.Lux Power Unit	•	•	•	•
Gnathoflex			•	
crea.lign Modelling Liquid	•	•	•	•
combo.lign Opaquer	•			
crea.lign Opaker	•	•	•	•
combo.lign Befestigungskomposit	•			
novo.lign Verblendschalen	•			
crea.lign Gel	•	•	•	•
crea.lign Paste	•	•	•	•
visio.paint Malfarben	•	•	•	•
visio.lign Toolkit	•	•	•	•

bre.Lux Polymerisationszeiten

für visio.lign® Systemkomponenten

Hersteller	Produkt	bre.Lux LED N (Handlampe)		bre.Lux Power Unit (Standgerät)		
		Finale Polymerisation	Fixierung / Anhärtung	Zwischenpolymerisation	Finale Polymerisation	Angelieferte Funktion / Reduktion
bredent	visio.link	30 s	-	-	90 s	40 x (50 %)
bredent	combo.lign Befestigungskomposit	X	15 s	120 s	180 s	-
bredent	crea.lign Gel	X	15 s	180 s	360 s	20 x (50%)
bredent	crea.lign Paste	X	15 s	180 s	360 s	-
bredent	combo.lign Opaquer	X	15 s	180 s	180 s	-
bredent	crea.lign Opaker	-	30 s	180 s	360 s	-
bredent	visio.paint	-	40 s	90 s	90 s	-
bredent	crea.lign Stains	-	30 s	90 s	90 s	-

180 s Polymerisationszeit

- Nicht vorgesehen

X Kontraindikation

Lichtpolymerisationsgeräte und -zeiten

für die visio.lign® Systemkomponenten visio.link, combo.lign und crea.lign

Hersteller	Gerät	Wellenlänge in nm*	Polymerisationszeit visio.link	Polymerisationszeit combo.lign	Polymerisationszeit crea.lign Gel combo.lign Opaquer crea.lign Opaker
bredent	bre.Lux Power Unit	370 - 500	90 s	180 s	6 min
Dentsply / Degudent	Triat, Triat 2000 Eclipse	400 - 500 k. A.	3 min 60 s	6 min 180 s	10 min 6 min
Heraeus Kulzer	Dentacolor XS, Uni XS Heraflash	320 - 520 320 - 520	90 s 90 s	180 s 180 s	6 min 6 min
GC	Labolight LV-III	380 - 490	2 min	5 min	10 min
Ivoclar Vivadent	Targas Power Ofen Lumanat 100	400 - 580 400 - 580	4 min 4 min	180 s 180 s	8 min 6 min
Schütz Dental	Spektra 2000	310 - 500	2 min	180 s	6 min
Shofu Dental	Solitilte EX	400 - 550	90 s	180 s	6 min
Kuraray Dental	CS 110	k. A.	2 min	5 min	8 min
Hager & Werken	Speed Labolight	320 - 550	90 s	180 s	8 min
3M ESPE	Visio BETA (neu P1 - P4) Visio BETA (alt U0 - U3)**	400 - 500 400 - 500	< 4 min (P2) 7 min (U1, U3)	7 min (P2) 15 min (U0)	15 min (P1) 15 min (U0)

* Herstellerangaben

** Neuer Lampensatz empfehlenswert

Farbkombinationstabellen

crea.lign Opaker

	crea.lign Opaker System-Farben								
	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3	Farbe 4	Farbe 5	Farbe 6	Farbe 7	Farbe 8	GUM
Klassische A - D Farben	A1 / B2	A2	A3 / D3	B1 / C1 / BL3	C2 - C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	-

combo.lign Opaquer

	combo.lign Opaquer System-Farben			
	light	medium	intensiv	GUM
Klassische A - D Farben	A1 - A3 / B1 - B2 / C1 - C2	A3.5 / B3 - B4 / D2 - D3	A4 / C3 - C4 / D4	-

crea.lign Dentin zu Enamel

	crea.lign Gel Enamel System-Farben			
	E1	E2	E3	E4
crea.lign Dentin Gel und Paste				
BL3 *	-	-	-	-
Klassische A - D Farben				
A1	•			
A2		•		
A3		•		
A3.5			•	
A4				•
B1	•			
B2		•		
B3			•	
B4			•	
C1	•			
C2			•	
C3			•	
C4				•
D2	•			
D3			•	
D4			•	

* Bleachfarbe BL3 harmoniert mit crea.lign Gel Incisal Universal



Die Bestellscheine und mehr zum
visio.lign® Verblendsystem finden Sie
unter www.visio-lign.com.

**„Alles, was gegen die Natur ist,
hat auf die Dauer keinen Bestand.“**

- Charles Darwin -

www.visio-lign.com

