

Пасты crea.lign  
Таблицы сочетания цветов



crea.lign Эмаль	Классические цвета A-D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
E1																	
E2																	
E3																	
E4																	

В качестве дополнения ко всем дентиновым и эмалевым массам можно использовать прозрачную массу для индивидуализации Transpa oral.

Опакер crea.lign	Цвета системы								
Цвета системы	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Классические цвета A-D	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 - C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3

В качестве дополнения к opakеру crea.lign 1-9 в ассортименте opakеры crea.lign GUM и crea.lign Z.  
Опакер GUM подходит ко всем оттенкам GUM. Опакер Z предназначен специально для каркасов из диоксида циркония.

crea.lign

Облицовочный композит

# Выбор паст

© 2018 Автор: з/т Андреас Людтке (Andreas Lüdtkе), Байройт, Германия

## Склонность к изменению цвета [ΔE]

Окрашивающие вещества:  
Выдерживание в кофе,  
чае, табаке, красном вине и  
метиленовом синем

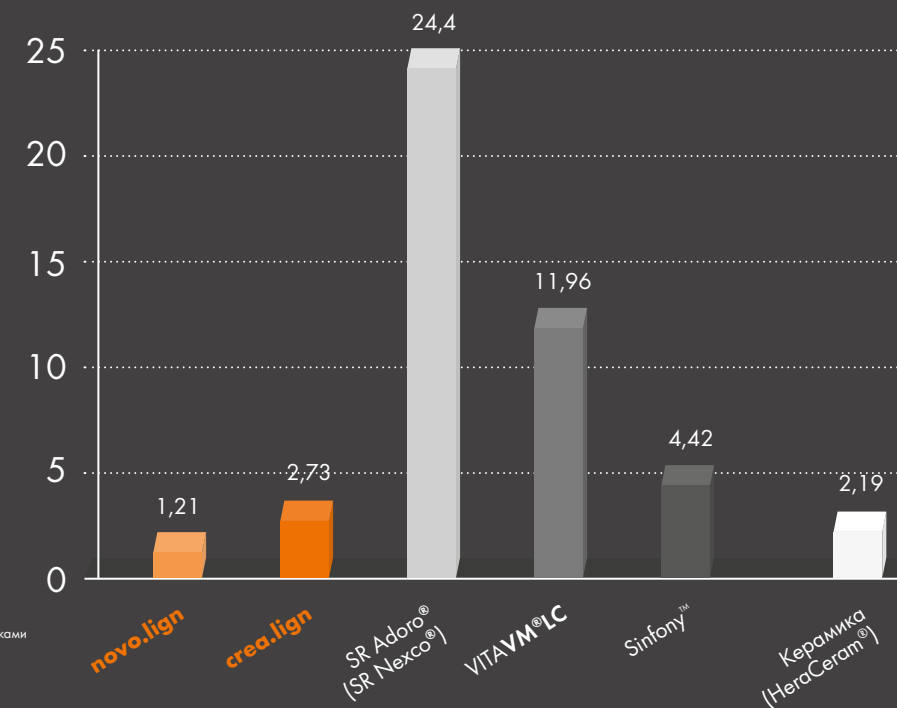


График  
«Склонность к изменению цвета [ΔE]»  
© Отчет об исследовании от 07 мая 2012 г.,  
А. Жанин (A. Rzapny) и Р. Гебель (R. Göbel),  
Университетская клиника Иены, Германия

Все названия, обозначенные символом ® или ™, являются защищенными торговыми марками и/или фирменными знаками сторонних правообладателей.

Паста crea.lign  
Облицовочный композит



create natural beauty

bredent group

009907RU-20181008

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



powered by  
visio.lign

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.  
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: +49 7309 872-443 · Ф: +49 7309 872-444 · www.visio.lign.com · @: info@bredent.com

**БЕЗ ГРАНИЦ**  
Все пасты crea.lign подходят для использования с гелевыми массами crea.lign и опакерами и предусматривают возможность комбинированного применения без видимых переходов.

**crea.lign — слои**

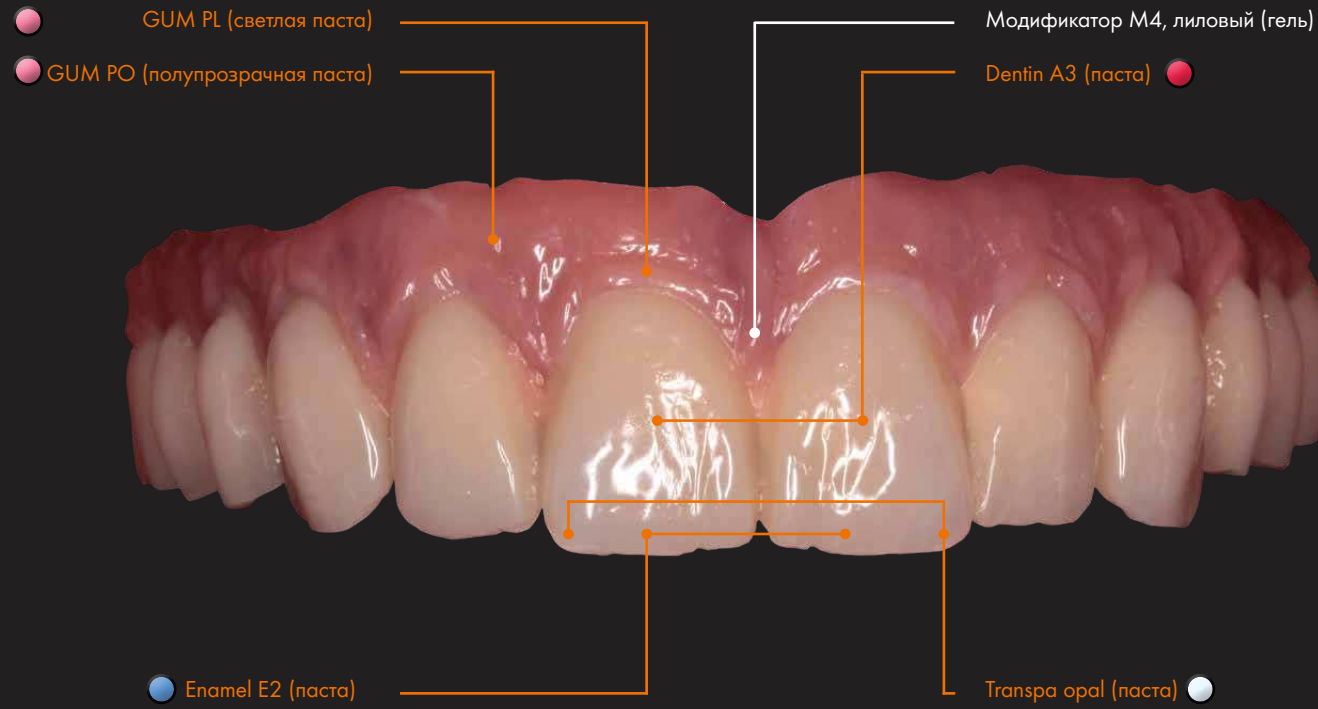


Фото: © 2018 Автор: з/т Андреас Людтке (Andreas Lüdtkе), Байройт, Германия


crea.lign  
улучшенная  
рецептура  
ПАСТА



**Естественный цветовой эффект**  
Идеальный баланс между опалесценцией, флуоресценцией и прозрачностью позволяет достигнуть естественного, живого цветового эффекта.  
Кроющая способность и прозрачность зависят от толщины слоя. Кроющая способность возрастает по мере увеличения толщины слоя. Прозрачность демонстрирует обратную зависимость.  
Резцовые массы crea.lign идеально подходят для использования с дентиновыми массами.

**Простота моделирования**  
Более мягкая и эластичная консистенция. Простота придания формы. Без нежелательного склеивания, возможность передачи малейших переходов в процессе моделирования.

**Пасты crea.lign**

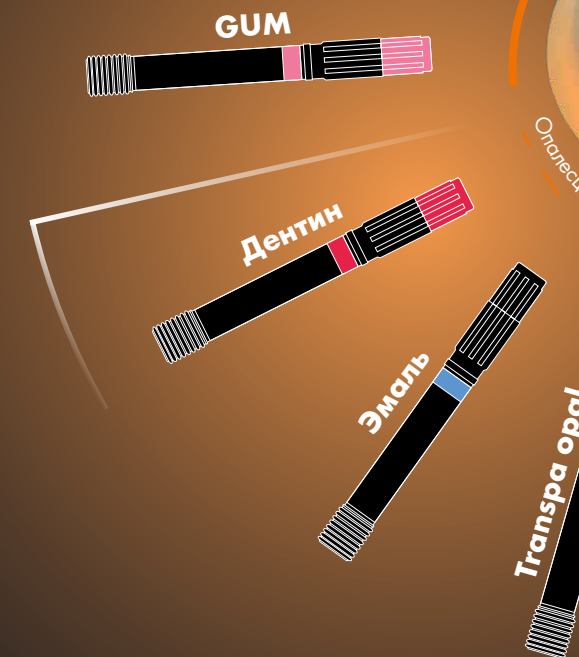

Опалесценция  
Прозрачность

**Оптимизированные значения силы сцепления**  
Благодаря содержанию наполнителя 60 % снижается степень усадки в процессе полимеризации. Состав позволяет достигать большой глубины отверждения.  
Применяемые керамические наполнители повышают устойчивость к истиранию и препятствуют образованию налета и изменению цвета.  
Благодаря простоте полировки пасты crea.lign можно быстро достичь стойкого блеска.

**Надежное и быстрое применение**

**Шероховатость поверхности после полировки [мкм]**

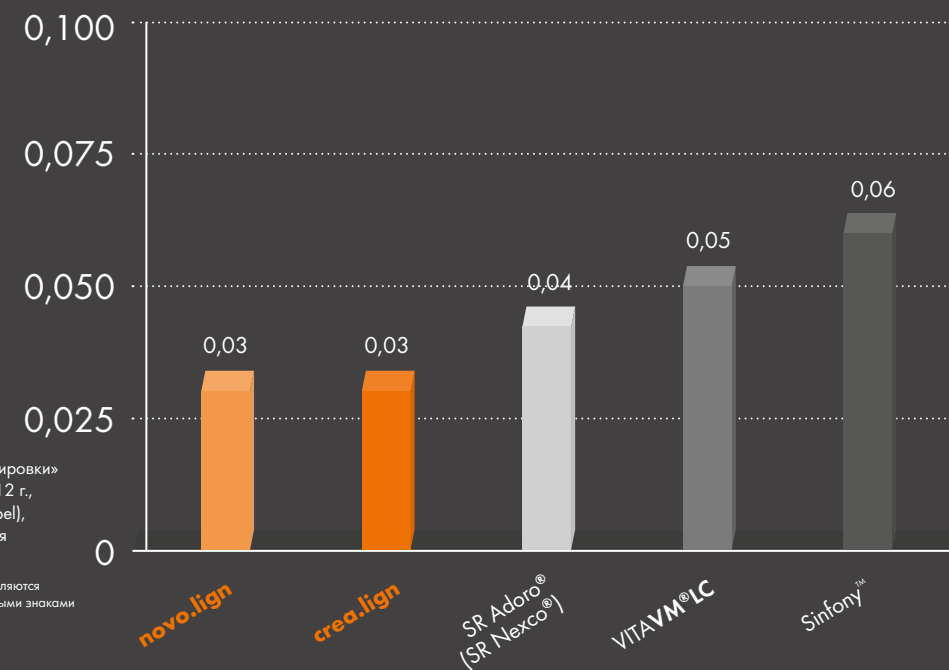


График «Шероховатость поверхности после полировки»  
© Отчет об исследовании от 07 мая 2012 г., А. Жанин (A. Rzapny) и Р. Гебель (R. Göbel), Университетская клиника Иены, Германия

Все названия, обозначенные символом ® или ™, являются защищенными торговыми марками и/или фирменными знаками сторонних правообладателей.



Дентиновые массы в классических цветах от А до D и Blach B13