



crea.lign® Enamel	Colores clásicos A-D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
E1																	
E2																	
E3																	
E4																	

La pasta para personalización Transpa opal puede aplicarse adicionalmente a todas las pastas de dentina y esmalte.

crea.lign® Opaker colores del sistema	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colores clásicos A-D	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 / C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3

De forma adicional al opaquizante crea.lign® Opaker 1-9, se dispone de crea.lign® Opaker GUM y crea.lign® Opaker Z.
El opaquizante GUM es óptimo para todos los tonos encía. El opaquizante Z es especial para estructuras de óxido de circonio.

Selección de pastas

© 2018 by TD Andreas Lüdike, Bayreuth, Alemania

Tendencia a la tinción [ΔE]

Medios de tinción:
conservación en café, té, tabaco, vino tinto y azul de metileno

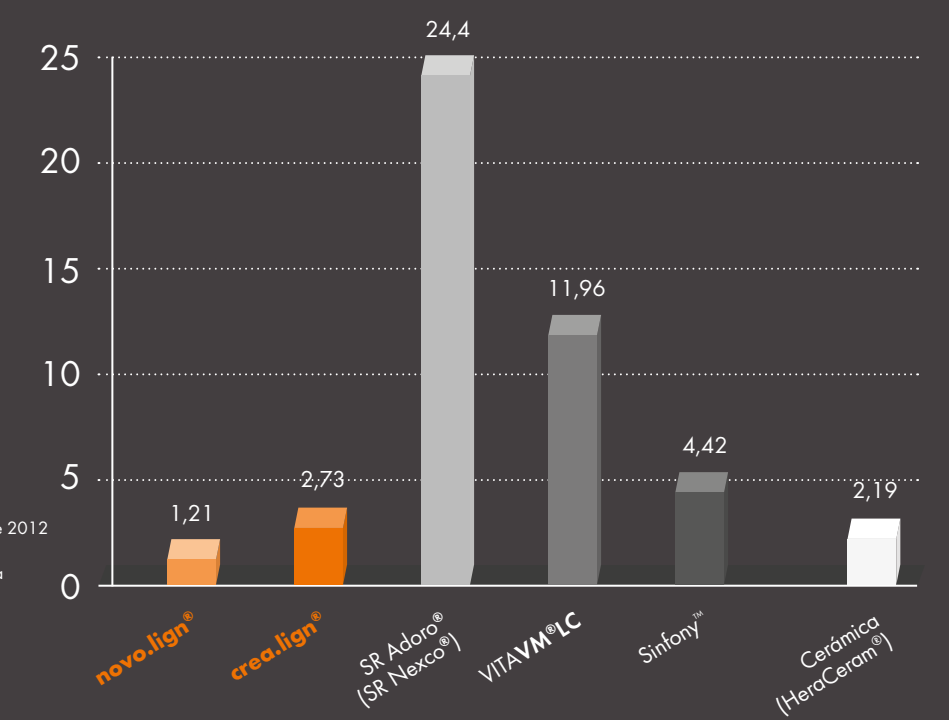


Gráfico "Tendencia a la tinción ΔE"
© Informe de la investigación del 7 de mayo de 2012 de A. Rzanny y R. Göbel, Hospital Clínico Universitario de Jena, Alemania

Todos los nombres señalados con los símbolos ® o ™ se refieren a marcas registradas y / o a nombres de empresas de titulares terceros.



create natural beauty

bredent group

0099070E-20190628
Salvo error y modificaciones



create natural beauty

powered by
visio.lign®



SIN LIMITACIONES

Todas las pastas crea.lign® son compatibles con las pastas crea.lign® Gel así como con los opaquizantes, por lo que pueden combinarse con estos durante el procesamiento sin problemas.

crea.lign® - Capas

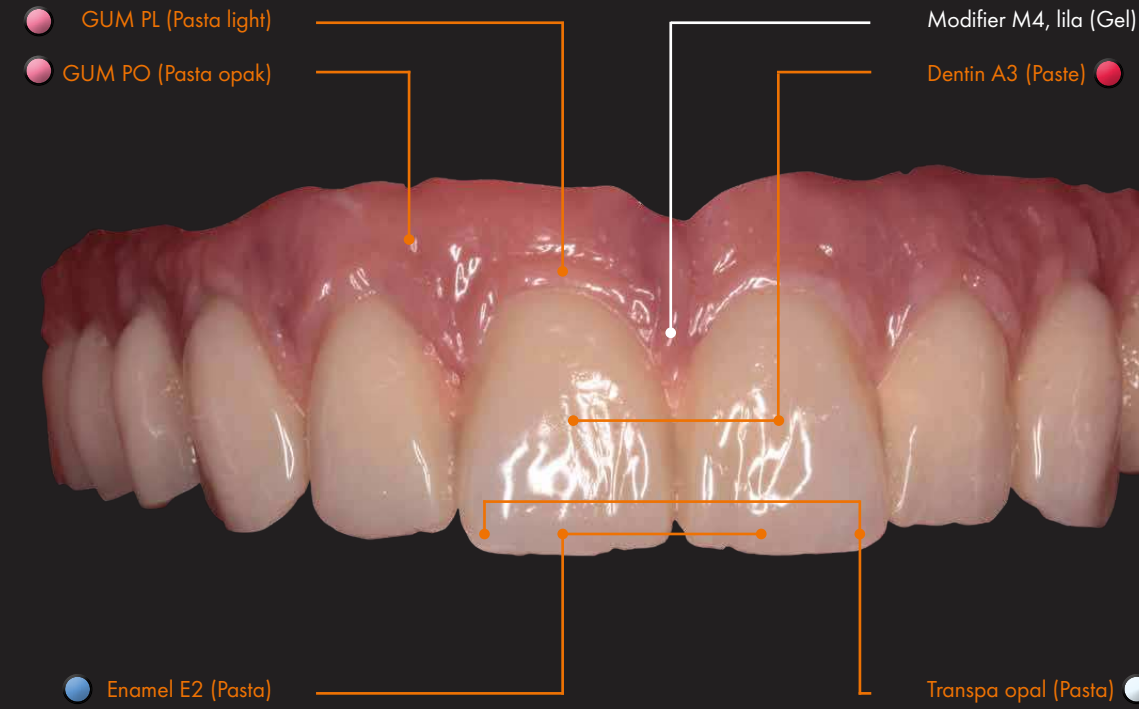


Imagen: © 2018 by TD Andreas Lüdike, Bayreuth, Alemania

Rugosidad de la superficie tras el pulido [µm]

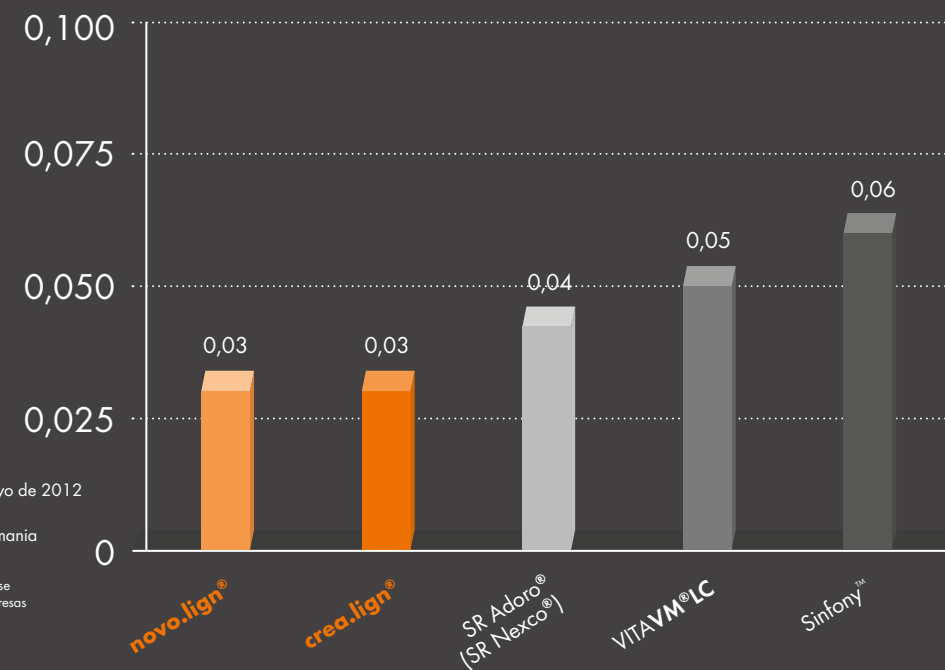


Gráfico
„Rugosidad de la superficie tras el pulido“
© Informe de la investigación del 7 de mayo de 2012
von A. Rzanny und R. Göbel,
Hospital Clínico Universitario de Jena, Alemania

Todos los nombres señalados con los símbolos ® o ™ se refieren a marcas registradas y / o a nombres de empresas de titulares terceros.



PASTA



Color de efecto natural

Equilibrio entre opalescencia, fluorescencia y translucidez para conseguir un efecto de color natural y vivo.


La cubrición y la translucidez se controlan mediante el grosor de la capa. La cubrición aumenta con el grosor de la capa. La translucidez se consigue justo al contrario.

Las pastas incisales crea.lign® están perfectamente armonizadas con las pastas para dentina.

Fácil de modelar

La consistencia nueva es más blanda y suave. El modelado de formas es fácil. No se pega y permite crear transiciones finas.

crea.lign® Pastas

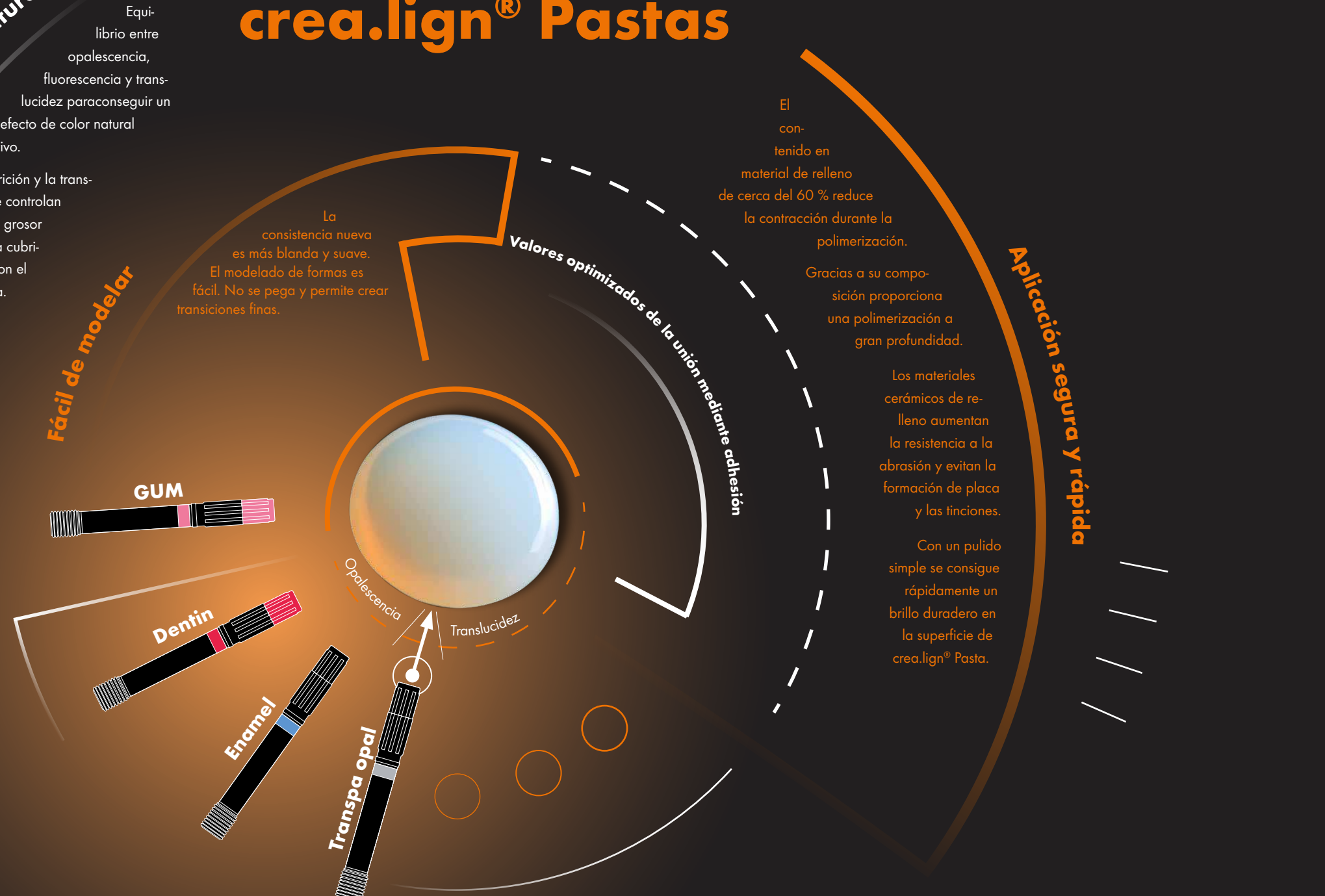

Nuevas pastas GUM



Pastas Dentin de acuerdo con los colores clásicos A-, o D y Bleach B13



Aplicación segura y rápida